

ENTRETIEN DU SET DE VOTRE TIRE-LAIT


Vous avez reçu un set à usage personnel

Entre chaque utilisation votre set de tire-lait doit être nettoyé. Pour cela, dirigez-vous vers le local «biberonnerie sale» prévu dans l'unité de néonatalogie ou le local «tire-lait» dans l'unité de maternité.

Votre bébé étant hospitalisé, votre set doit être nettoyé **et** stérilisé.

NETTOYAGE DE VOTRE SET

1. Le tuyau qui sépare le set de la machine ainsi que l'embout blanc ne doivent pas être mouillés..
2. Démontez le reste des pièces et rincez-les d'abord à l'eau froide afin d'éliminer les résidus de lait maternel.
3. Nettoyez-les ensuite à l'eau chaude savonneuse (produit vaisselle) dans le bac A en plastique qu'on vous a donné.
4. Rincez le tout à l'eau claire et très chaude.

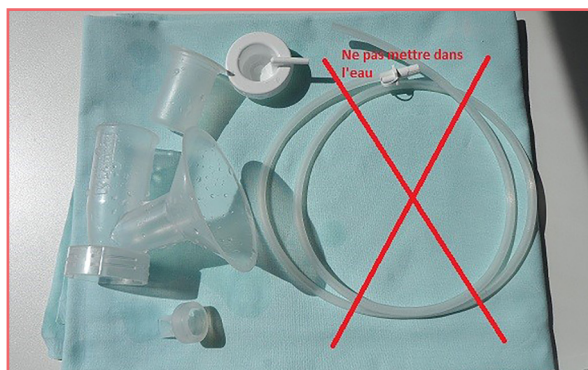

STÉRILISATION DU SET

Pour cette étape, utilisez le bac B dans lequel vous allez préparer une solution désinfectante à base de Milton. Elle est valable **24h**.

1. Remplissez votre bac B avec 1,250 litre d'eau et ajoutez-y un quart du comprimé de Milton effervescent.
2. Placez le set de tire-lait propre et démonté dans cette solution désinfectante.
3. Immergez complètement tout le matériel pendant 15 minutes (ne pas dépasser ce délai car cela risque d'endommager les pièces en caoutchouc).
4. Récupérez le matériel avec des mains propres et secouez-le pour enlever l'excédent d'eau.

Le matériel stérilisé **ne peut jamais** être rincé ou essuyé !

5. Déposez le matériel dans le bac A préalablement passé à la lingette désinfectante Eco-Bac Wipes. N'oubliez pas de refermer le bac.
4. Protégez le bac de toute source de chaleur.

Chaque 24h, inversez les bacs.

Ces précautions sont indispensables pour garantir la bonne conservation et éviter la contamination de votre lait par les microbes hospitaliers.